

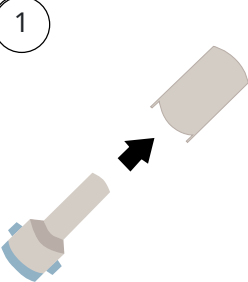


Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

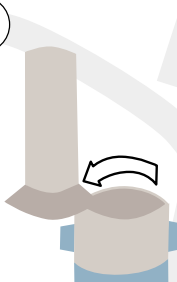
Como usar as cápsulas com o inalador

Atenção: Não engolir as cápsulas. Usar exclusivamente para inalação. Use as cápsulas apenas com o inalador fornecido na embalagem. Remova as cápsulas do blíster apenas imediatamente antes de seu uso. Certifique-se que os seus dedos estejam completamente secos para não molhar a cápsula. Não engula a cápsula. O pó dentro da cápsula é para inalação apenas.


Utilizar o inalador

- 

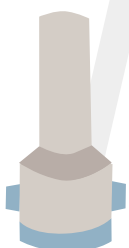
1

Retire a tampa do inalador.
- 

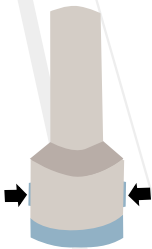
2

Abra o compartimento da cápsula, segurando firmemente a base do inalador e girando o bocal na direção indicada pela seta.
- 

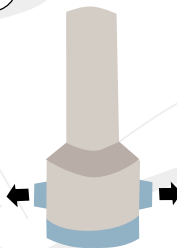
3

Separe um dos blister da tira, destacando-o; retire a película protetora para expor a cápsula, e coloque a cápsula na câmara da cápsula. **IMPORTANTE:** Não coloque a cápsula no bocal.
- 


4

Feche o compartimento da cápsula, voltando o bocal até que você escute um "click".
- 


5

Segure o inalador na posição vertical com o bocal para cima; Pressione firme e simultaneamente os botões azuis, para romper a cápsula.
- 

6

Em seguida, solte os botões. Faça isso apenas uma vez.
- 

7

Expire o máximo possível.
- 

8

Coloque o bocal do inalador na boca e incline levemente sua cabeça para trás. Feche firmemente os lábios ao redor dele.



9



Inspire, pela boca, de maneira rápida, constantemente, e o mais profundamente possível. Deve ouvir um som de vibração da cápsula.

10



Após inspirar através do inalador, segure sua respiração pelo maior tempo que você confortavelmente conseguir; enquanto isso retire o inalador da boca.

11

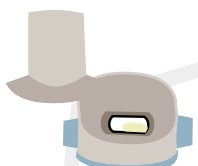


Em seguida, expire suavemente.

12

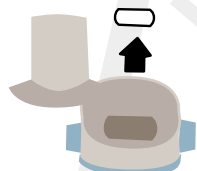
Não ouviu barulho da cápsula ao inspirar? **NÃO TENTE DESPRENDER A CÁPSULA** apertando repetidamente os botões. Se não ouvir esse ruído deve rever os passos consultando o panfleto que vem com o inalador e/ou contatar um profissional de saúde.

13



Abra o compartimento da cápsula. Se ainda tiver um resto de conteúdo na cápsula deve rever os passos consultando o panfleto que vem com o inalador e/ou contatar um profissional de saúde.

14



Após o uso de todo o pó, abra o compartimento da cápsula. Remova a cápsula vazia e utilize um pano seco ou uma escova macia para remover qualquer pó que restou. Obs: **NÃO UTILIZE ÁGUA** para limpar o inalador.

15



Feche o bocal e recoloque a tampa.