



Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)


### Testar o inalador

Inalador: Antes de usar o inalador pela primeira vez, certificar-se que funciona. Retirar a tampa do aplicador bucal, pressionando ligeiramente os lados. Para se certificar que funciona pela primeira vez, agitar bem, direcionar o aplicador bucal para longe e pressionar o recipiente metálico para que liberte duas doses no ar. Se o inalador não for usado durante cinco dias ou mais, agitar bem e libertar duas doses no ar, para certificar que funciona.

Câmara expansora: Examine cuidadosamente o produto em busca de danos, falta de peças ou objetos estranhos. Remova todos os objetos estranhos antes de usar. O produto deve ser substituído **IMEDIATAMENTE** se houver peças danificadas ou ausentes. Se necessário, use o inalador pressurizado doseável sozinho até que uma substituição seja obtida. Se os sintomas piorarem, por favor, procure atendimento médico imediato.


### Utilizar o inalador

1

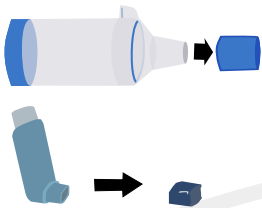

Remova as tampas do inalador e da câmara expansora.

2

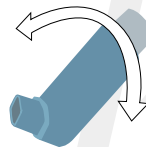


Agitar bem o inalador para se assegurar que qualquer partícula estranha é removida e que o conteúdo é uniformemente misturado.

3



Insira o inalador no orifício adequado na câmara expansora.

4

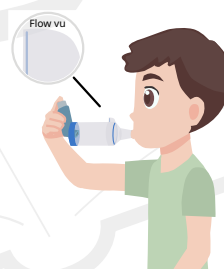

Coloque o bocal na boca e feche os lábios ao redor para garantir uma selagem eficaz. O Indicador de Fluxo Inspiratório Flow-Vu® só se move se o paciente tiver uma boa vedação.

5



Expire suavemente.

6



Pressione o inalador no início de uma inalação lenta. Use o Flow-Vu® para auxiliar na coordenação desta etapa.


7

2-3 x



Inspire lenta e profundamente pela boca. Mantenha os lábios apertados no bocal respirando normalmente 2-3 vezes através da câmara após o inalador ser pressionado. Diminua a velocidade de inalação se ouvir o som do apito FlowSignal®. Isso significa que você está inalando muito rapidamente. Administrar 1 puff de cada vez.

8

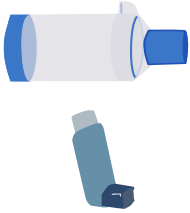

Recolocar as tampas, pressionando-as firmemente e ajustando-as ao lugar.