



Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)


Testar o inalador

Inalador: Antes de usar o inalador pela primeira vez, certificar-se que funciona. Retirar a tampa do aplicador bucal, pressionando ligeiramente os lados. Para se certificar que funciona pela primeira vez, agitar bem, direcionar o aplicador bucal para longe e pressionar o recipiente metálico para que liberte duas doses no ar. Se o inalador não for usado durante cinco dias ou mais, agitar bem e libertar duas doses no ar, para certificar que funciona.

Câmara expansora: Procure e remova quaisquer objetos estranhos na câmara.


Utilizar o inalador

1

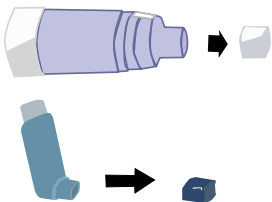


Remova as tampas do inalador e da câmara expansora.

2

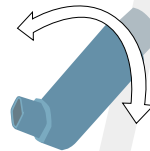


Agitar bem o inalador para se assegurar que qualquer partícula estranha é removida e que o conteúdo é uniformemente misturado.

3

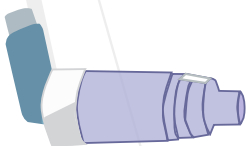

Insira o inalador forma segura na parte de trás da câmara expansora.

4

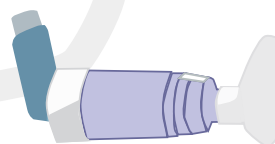

Coloque a máscara na extremidade bucal da câmara e enrosque gentilmente até ficar bem presa de forma segura.

5



Pressione e segure a máscara sobre a boca e nariz.

6



Expire suavemente.




7



Pressione o inalador no início de uma inalação lenta.


8

5-6 x

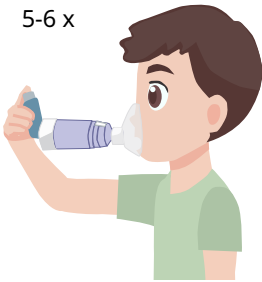

Inspire lenta e profundamente pela boca. Mantenha os lábios apertados no bocal respirando normalmente 5-6 vezes através da câmara após o inalador ser pressionado. Diminua a velocidade de inalação se ouvir o som do apito. Isso significa que você está inalando muito rapidamente. A válvula de expiração abre sempre que expira, o que pode ajudar a contar as respirações. Administrar 1 puff de cada vez.

9

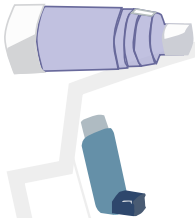

Recolocar as tampas, pressionando-as firmemente e ajustando-as ao lugar.