



Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Testar o inalador


Inalador: Antes de usar o inalador pela primeira vez, certificar-se que funciona. Retirar a tampa do aplicador bucal, pressionando ligeiramente os lados. Para se certificar que funciona pela primeira vez, agitar bem, direcionar o aplicador bucal para longe pressionar o recipiente metálico para que liberte duas doses no ar. Se o inalador não for usado durante cinco dias ou mais, agitar bem e libertar duas doses no ar, para certificar que funciona.

Cuidados a ter com a câmara expansora

Ao tratar bebés, crianças e qualquer pessoa que precise de ajuda o seguinte deve ser observado sem falhas: O produto contém peças pequenas. Pequenas partes podem bloquear o trato respiratório e originar risco de asfixia. Portanto, certifique-se de manter sempre este produto fora do alcance de bebés e crianças. Pode ser desinfetada até 60 vezes. Se você usar o dispositivo todos os dias, substitua todos os componentes da sua câmara após um ano, porque o material pode mudar com o tempo. Isso pode prejudicar a eficácia do tratamento. Certifique-se de que não há corpos estranhos na câmara expansora antes de cada uso. Antes de cada uso, inspecione a câmara expansora quanto a danos. Substitua todas as peças quebradas, deformadas ou seriamente descoloridas.


Utilizar o inalador

1

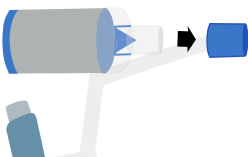


Remova as tampas do inalador e da câmara expansora. Verifique se a válvula da câmara expansora está bem posicionada.

2

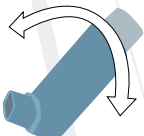

Agitar bem o inalador para se assegurar que qualquer partícula estranha é removida e que o conteúdo é uniformemente misturado. Segurar o inalador na posição vertical entre os dedos com o polegar sob a base, abaixo do aplicador bucal.


3

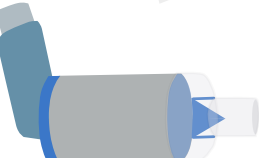

Insira o inalador no orifício adequado na câmara expansora.



4

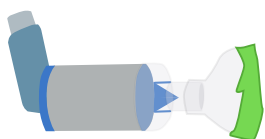

Insira o conector da máscara na abertura da máscara para bebé ou criança. Prenda a máscara com o conector da máscara no bocal da câmara expansora. CUIDADO É essencial assegurar que a placa azul da válvula expiratória na máscara macia seja pressionada para fora antes de cada uso.

5



Coloque a câmara expansora com máscara gentilmente no rosto. A boca e nariz devem estar cobertos.

6




Quando o paciente começar a inspirar profundamente e devagar, pressione o topo do inalador.

7



Manter os lábios apertados no bocal respirando normalmente; inspirar lenta e profundamente pela boca. crianças com idade inferior a 18 meses devem inalar 4 a 6 vezes; crianças com idade superior a 18 meses devem inalar profundamente 2 a 4 vezes. Administrar 1 puff de cada vez.

8

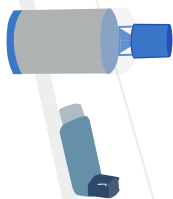

Recolocar as tampas, pressionando-as firmemente e ajustando-as ao lugar.