

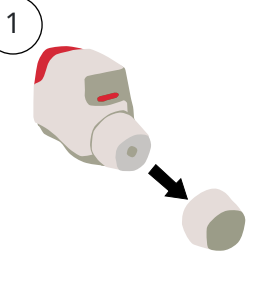


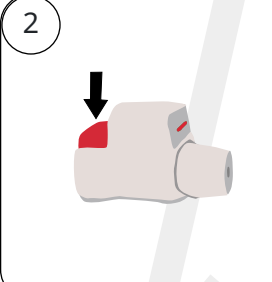
Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

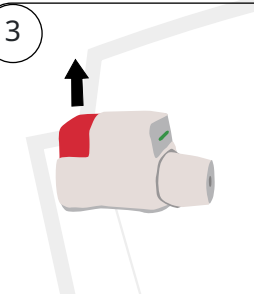
Carregar o inalador

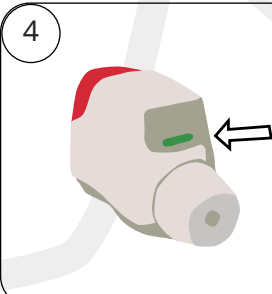
Coloque o inalador de pó seco na sua frente. Pressione suavemente ao mesmo tempo, as zonas com nervuras dos dois lados da tampa, movendo a tampa para a frente e para cima. Remova a folha de alumínio protectora do recipiente cilíndrico do cartucho e retire o novo cartucho. Esta operação só deve ser feita imediatamente antes de utilizar o cartucho. O código de cor do cartucho deve corresponder à cor do botão doseador. Insira o cartucho no inalador com o contador de doses voltado para o bocal. Não pressione o botão doseador enquanto está a inserir o cartucho. Recarga: O inalador deve ser limpo sempre que o cartucho é substituído após remoção do cartucho vazio. Se já utilizou o inalador, primeiro remova o cartucho vazio e depois insira o novo cartucho. Não pressione o botão doseador enquanto está a inserir o cartucho. Volte a colocar a tampa na direção das setas e pressione para baixo em direção ao doseador colorido até ouvir um estalido.


Utilizar o inalador


- 

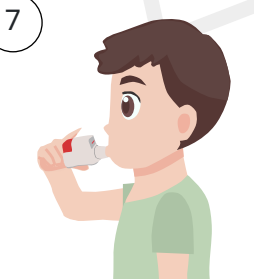
1 Primeiro remova a tampa protectora.
- 

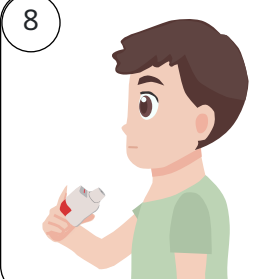
2 Prima completamente o botão doseador colorido. Ouve-se um clique duplo e a cor da janela de controlo muda de vermelho para verde.
- 

3 Neste momento solte o botão doseador colorido.
- 

4 A cor verde na janela de controlo indica que o inalador está pronto para usar.
- 

5 Expire (mas não para dentro do inalador).
- 

6 Coloque os lábios em volta do bocal.
- 

7 Inale o pó com uma inspiração profunda. Durante esta inspiração deve ouvir um clique, que indica uma inalação correta.
- 

8 Retenha a respiração alguns segundos.

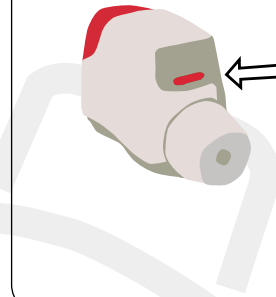


9



Seguidamente respire normalmente.

10



Verifique se a cor na janela de controlo mudou novamente para vermelho, o que também indica que a inalação foi efectuada corretamente. Se a cor da janela de controlo não voltar a ficar vermelha, a inalação deve ser repetida.

11



Voltar a colocar a tampa.