




Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Preparar o inalador

Mantenha a tampa fechada. Pressione o dispositivo de segurança e ao mesmo tempo retire a base transparente com sua outra mão. Insira o lado estreito do frasco no inalador. Coloque o inalador sobre uma superfície firme (por exemplo, uma mesa) e pressione para baixo com firmeza até que o frasco se encaixe. Coloque a base transparente de volta ao seu lugar até ouvir um clique. Mantenha a tampa fechada. Gire a base transparente na direção das setas do rótulo até ouvir um clique (meia volta). Abra a tampa até que fique travada completamente na posição aberta. Aponte o inalador em direção ao chão. Pressione o botão de aplicação. Feche a tampa. Repita os passos desde girar a base transparente até que seja visível uma nuvem. Após visualizar a nuvem, repita mais três vezes.


Utilizar o inalador

1

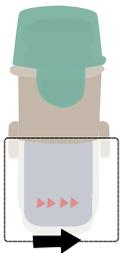

Mantenha a tampa fechada. GIRE a base transparente na direção das setas do rótulo até ouvir um clique (meia volta).

2

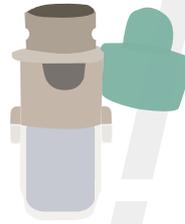

ABRA a tampa até que fique travada completamente na posição aberta.

3



Expire (solte o ar) lenta e totalmente.

4



Coloque os lábios em torno do bocal, sem cobrir as entradas de ar.

5



Enquanto inspira (enche o peito de ar) lenta e profundamente pela boca, APERTE o botão de aplicação e continue inspirando.

6



Sustenha a respiração por 10 segundos ou enquanto lhe for confortável.

7



Em seguida, volte a respirar normalmente.

8



Recolocar a tampa na peça bucal, pressionando-a firmemente e ajustando-a ao lugar.