



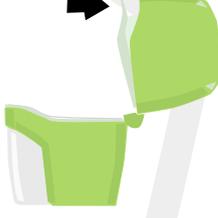
Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Como usar as cápsulas com o inalador

O inalador Zonda apenas deve ser utilizado com o frasco de cápsulas fornecido. Não reutilizar o inalador para outro frasco de cápsulas. Descarte o dispositivo Zonda após 30 utilizações (15 utilizações se utilizado em conjunto com a apresentação de 15 cápsulas). Não armazene a cápsula no inalador. Retire uma cápsula do frasco imediatamente antes de utilizar e feche bem o frasco, para evitar exposição a humidade.

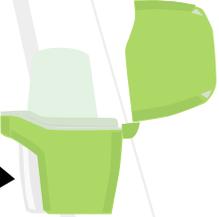
Utilizar o inalador

- 

Empurre a tampa para cima.
- 

Segure a base do inalador firmemente e abra o bucal puxando direção da seta para abri-lo.
- 

Retire uma cápsula do frasco, colocando-a no compartimento em forma de cápsula na base do inalador. Nunca coloque uma cápsula diretamente no bucal.
- 

Feche o bucal até ouvir um clique, deixando a tampa de proteção aberta.
- 

Segure no inalador com o bucal para cima e pressione por completo e de uma só vez o botão de perfuração. Tal perfura a cápsula e permite a libertação do medicamento quando inspirar.
- 

Em seguida, liberte o botão.
- 

Expire por completo. É importante fazer isto longe do bucal. Evite expirar para o bucal em que altura for.
- 

Leve o bucal até à boca e mantenha a cabeça numa posição vertical. Feche firmemente os lábios em torno do bucal.



9



Inspire lenta e profundamente, mas a um ritmo suficiente para ouvir ou sentir a cápsula vibrar dentro do compartimento.

10



Sustenha a respiração enquanto for confortável e, simultaneamente, retire o inalador da boca.

11



Retome a respiração normal.

12

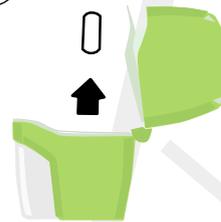
Se não ouviu barulho da cápsula ao inspirar? NÃO TENHA TENTADO DESPRENDER A CÁPSULA apertando repetidamente os botões. Se não ouvir esse ruído deve rever os passos consultando o panfleto que vem com o inalador e/ou contatar um profissional de saúde.

13



Abra o compartimento da cápsula. Se ainda tiver um resto de conteúdo na cápsula deve rever os passos consultando o panfleto que vem com o inalador e/ou contatar um profissional de saúde.

14



Após utilizar, abra novamente o bucal e retire a cápsula vazia.

15



Fechado o bucal e a tampa de proteção e guarde o inalador.